
DE

parsenn-produkte ag
medizintechnik

Saneo TENS *Swiss Edition*

Schmerzlinderung und neuromuskuläre Modulation

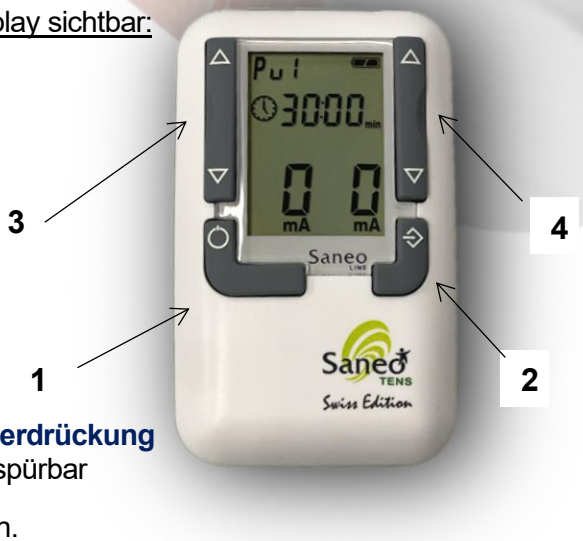

Einstellen der gewünschten Programme falls noch nicht im Display sichtbar:

* Einschalttaste (1) drücken
* Programmtaste (2) 3 Sekunden drücken (P blinkt)
* Mit Taste (3) Programm P auf gewünschte Nummer einstellen
* Programmtaste (2) drücken

* Stromstärke einstellen (3 / 4)

Standardprogramme:

P1 **Schmerztherapie TENS Anästhesie / Schmerzunterdrückung**
Unterhalb der Muskelstimulation einstellen, kribbeln spürbar

Nach 5 Minuten muss eine Schmerzreduktion da sein.

P2 **Schmerztherapie TENS moduliert Anästhesie / Schmerzunterdrückung**
Bei längeren Anwendungen weniger Gewöhnungseffekt bei der Therapie.
Unterhalb der Muskelstimulation einstellen, kribbeln spürbar.

Nach 5 Minuten muss eine Schmerzreduktion da sein.

P15 **Neuromodulation intern mit Sonden oder extern bei Muskelverspannungen**
Strom einstellen, bis ein leichtes Klopfen spürbar ist. Eventuell kurze Muskelkontraktionen.

Anwendungen täglich über mindestens 4 Wochen.

P16 **Kaada-Stimulation an der Hand** (Neuromodulation bei Schmerzen)
Strom einstellen, bis ein leichtes Klopfen spürbar ist. Ohne Muskelkontraktionen

Anwendung täglich über mindestens 4-12 Wochen.

Pu1 **Neuromodulation extern** (Verbesserung der sensorischen/motorischen Funktionen)
Strom einstellen, bis ein leichtes Kribbeln spürbar ist. Ohne Muskelkontraktionen
Anwendung zur Tibialis- oder Sakralstimulation im Bereich Inkontinenzbehandlung, zur Fingerspitzenstimulation oder bei sensorischen Defiziten bei neurologischen Befunden. Bei Schmerzen oder neurologischen B
efunden bei neuropathischen Schmerzen.

Anwendung täglich über mindestens 4-12 Wochen.

Version PPAG 8-2026

<u>Anwendung zur Neuromodulation an den Fingerspitzen (alternativ zum TipStim)</u>

Programm u1 beidseitig (Alternative P13)


Einstellungen:	Stimulationsmodus	kontinuierlich TENS
	Frequenz	20 Hz
	Pulsbreite	200 uS
	Behandlungszeit	30 Minuten




<u>Einstellen Programm u1 falls noch nicht im Display sichtbar:</u>

* Einschalttaste (1) drücken
* Programmtaste (2) 3 Sekunden drücken (P blinkt)
* Mit Taste (3) Programm P u1 (oder P13) einstellen
* Programmtaste (2) drücken
* Elektroden an den Fingern wie im Bild anbringen, je ein Kanal pro Finger anschliessen.
* Strom mit (3 + 4) pro Kanal soweit aufdrehen, bis ein wahrnehmbares Kribbeln ohne Kontraktion spürbar ist.


Behandlung täglich 4 – 12 Wochen eine halbe Stunde.

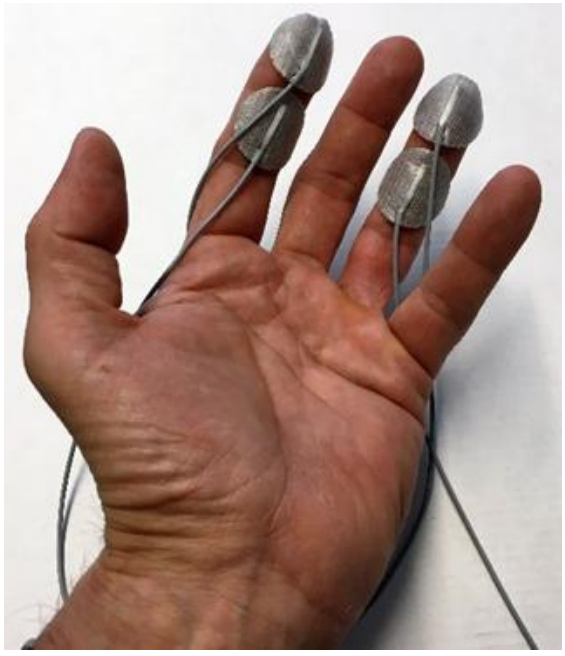



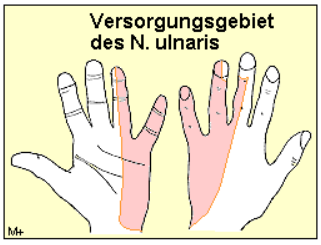

Nervus medianus

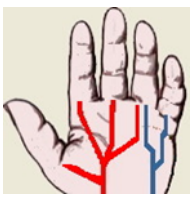

Nervus ulnaris

Anwendung zur Tibialis- oder Sakralstimulation „Neuromodulation“


Programm u1 beidseitig

Einstellungen:	Stimulationsmodus	kontinuierlich TENS
	Frequenz	20 Hz
	Pulsbreite	200 uS
	Behandlungszeit	30 Minuten


Einstellen Programm u1 falls noch nicht im Display sichtbar:

* Einschalttaste (1) drücken
* Programmtaste (2) 3 Sekunden drücken (P blinkt)
* Mit Taste (3) Programm P u1 einstellen
* Programmtaste (2) drücken
* Stimulation Tibialisnerv an beiden Fussknochen

  Stimulation Sakrum S2 / S3

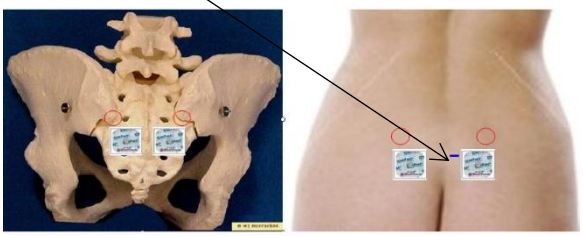




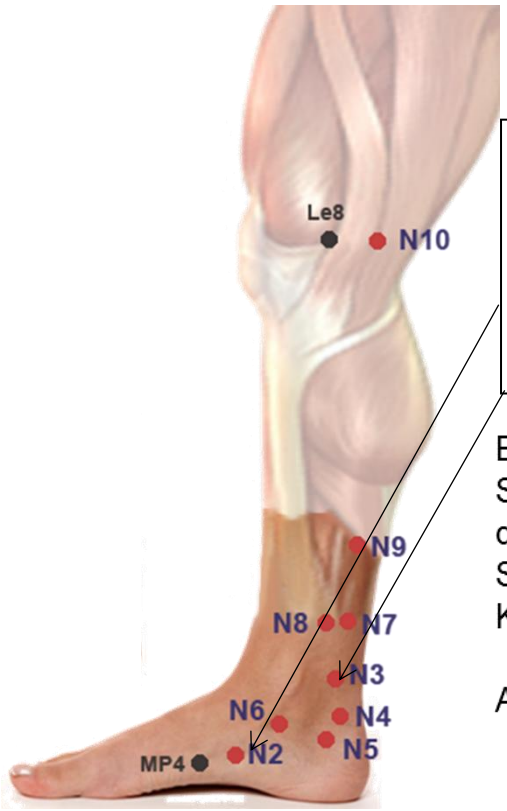

Platzierung auf N3
Pals platinum 25 mm
oder Pals ValuTrode
32 mm

Beim aufdrehen des Stroms, Plantarflexion der grossen Zehe.
Strom retour bis keine Kontraktion mehr da ist.

Angenehmes Kribbeln.

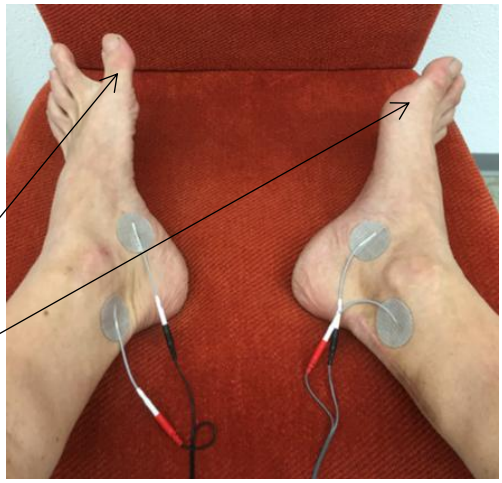

Notizen

parsenn-produkte ag
medizintechnik


FR

Saneo TENS *Swiss Edition*

Pour le traitement de la douleur ou la neuromodulation

Réglage des programmes souhaités s'ils ne sont pas encore visibles à l'écran :

* appuyer sur le bouton de mise en marche (1)
* Appuyer sur la touche de programme (2) pendant 3 secondes (P clignote)
* Régler le programme P sur le numéro souhaité avec la touche (3)
* appuyer sur la touche de programme (2)
* Régler l'intensité du courant (3 / 4)

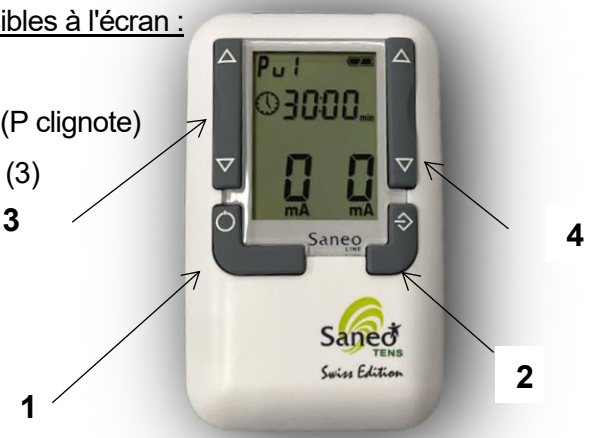

Programmes standard :

P1 **Traitement de la douleur TENS Anesthésie / Suppression de la douleur**
Régler en dessous de la stimulation musculaire, fourmillement perceptible.

Après 5 minutes, il doit y avoir une réduction de la douleur.

P2 **Traitement de la douleur TENS modulé Anesthésie / Suppression de la douleur**
En cas d'utilisation prolongée, moins d'effet d'accoutumance à la thérapie.
Régler en dessous de la stimulation musculaire, fourmillement perceptible.

Après 5 minutes, il doit y avoir une réduction de la douleur.

P15 **Neuromodulation interne avec sondes ou externe en cas de tensions musculaires**
Régler le courant jusqu'à ce qu'un léger battement soit perceptible. Éventuellement, courtes contractions musculaires.

Applications quotidiennes pendant au moins 4 semaines.


P16 **Stimulation Kaada sur la main** (neuromodulation en cas de douleurs) Régler le courant jusqu'à ce qu'un léger battement soit perceptible. Sans contractions musculaires.
Utilisation quotidienne pendant au moins 4 à 12 semaines.

Pu1 **Neuromodulation externe** (amélioration des fonctions sensorielles/motrices)
Régler le courant jusqu'à ce qu'un léger picotement soit ressenti.
Sans contractions musculaires
Utilisation pour la stimulation du bout des doigts ou en cas de déficits sensoriels en cas de résultats neurologiques.
En cas de douleurs ou de résultats neurologiques en cas de douleurs neuropathiques.
Utilisation quotidienne pendant au moins 4 à 12 semaines.

<u>Application pour la neuromodulation au bout des doigts (alternative au TipStim)</u>

Programme u1 des deux côtés (alternative P13)

Réglages:	Mode de stimulationcontinu	TENS
	Fréquence	20 Hz
	Largeur	d'impulsion 200 uS
	Durée du traitement	30 minutes

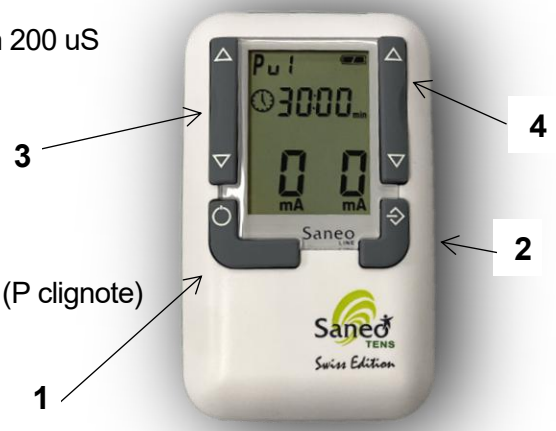


<u>Régler le programme u1 s'il n'est pas encore visible à l'écran :</u>

* appuyer sur le bouton de mise en marche (1)
* Appuyer sur la touche de programme (2) pendant 3 secondes (P clignote)
* Régler le programme P u1 (ou P13) avec la touche (3)
* appuyer sur la touche de programme (2)
* Appliquer les électrodes sur les doigts comme sur l'image, raccorder un canal par doigt.
* Augmenter le courant avec (3 + 4) par canal jusqu'à ce qu'un picotement perceptible soit ressenti sans contraction.


Traitement quotidien 4 - 12 semaines une demi-heure.





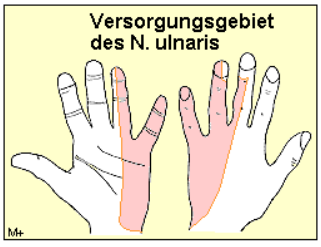

nerf médian

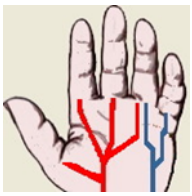

nerf ulnaire

Application pour la stimulation tibiale ou sacrée "neuromodulation


Programme u1 recto-verso

Réglages:	Mode de stimulationcontinu	TENS
	Fréquence	20 Hz
	Largeur	d'impulsion 200 uS
	Durée du traitement	30 minutes


Régler le programme u1 s'il n'est pas encore visible à l'écran :

* appuyer sur le bouton de mise en marche (1)
* Appuyer sur la touche de programme (2) pendant 3 secondes (P clignote)
* Régler le programme P u1 avec la touche (3)
* appuyer sur la touche de programme (2)
* Stimulation du nerf tibial sur les deux os du pied

  Stimulation du sacrum S2 / S3

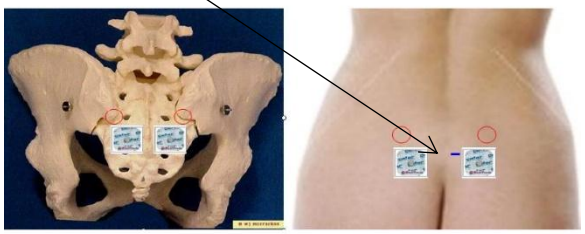




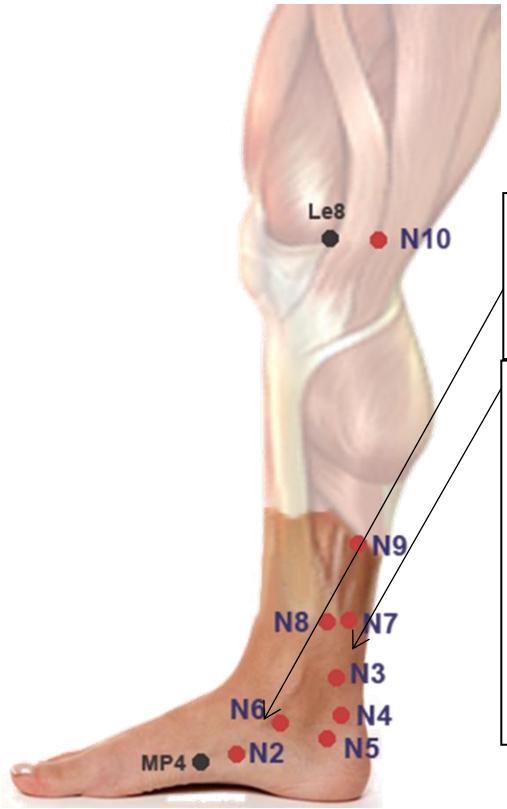

Placement sur N3 avec Pals Platinum 25 mm ou Pals ValuTrode 32 mm

En remontant le courant, faire une flexion plantaire du gros orteil. (traction vers le bas)
Tourner le courant en sens inverse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de contraction.
Sensation agréable de picotement.

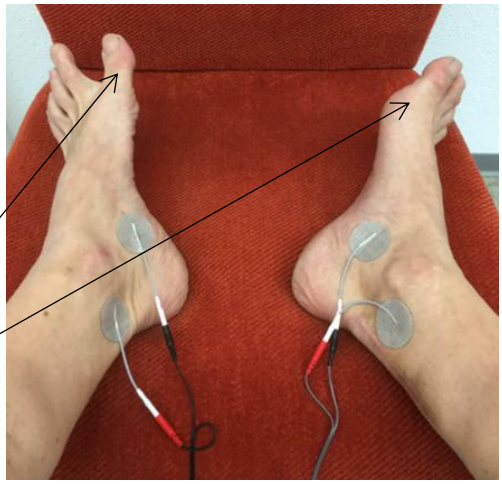

Notizen

parsenn-produkte ag
medizintechnik

IT

Saneo TENS *Swiss Edition*
per il trattamento del dolore o la neuromodulazione

Impostazione dei programmi desiderati se non sono ancora visibili sullo schermo :

* premere il pulsante di avvio (1)
* Premere il pulsante del programma (2) per 3 secondi (P lampeggia).
* Impostare il programma P sul numero desiderato utilizzando il pulsante (3).
* premere il pulsante del programma (2)
* Regolare l'intensità della corrente (3 / 4)



Programmi standard :

P1 **Trattamento del dolore TENS Anestesia / Soppressione del dolore**
Impostare sotto la stimolazione muscolare, con formicolio percepibile.

Dopo 5 minuti, il dolore dovrebbe diminuire.

P2 **Trattamento del dolore TENS modulata Anestesia / Sollievo dal dolore**
Con l'uso prolungato, diminuisce l'assuefazione alla terapia.
Impostazione al di sotto della stimolazione muscolare, formicolio percepibile.

Dopo 5 minuti il dolore dovrebbe diminuire.

P15 **Neuromodulazione interna con sonde o esterna in caso di tensione muscolare**
Regolare la corrente fino a percepire un leggero battito. Possibilmente brevi contrazioni muscolari.

Applicare quotidianamente per almeno 4 settimane.

P16 **Stimolazione Kaada sulla mano** (neuromodulazione in caso di dolore) Regolazione della

Corrente. Fino a percepire un leggero battito. Nessuna contrazione muscolare.
Uso quotidiano per almeno 4-12 settimane.

Pu1 **Neuromodulazione esterna** (miglioramento delle funzioni sensoriali/motorie
Regolare la corrente fino a percepire una leggera sensazione di formicolio. Senza Contrazioni muscolari. Utilizzare per la stimolazione della punta delle dita o in caso di deficit sensoriale in presenza di reperti neurologici. In caso di dolore neuropatico o di reperti neurologici. Uso quotidiano per almeno 4-12 settimane.

<u>Applicazione di neuromodulazione con le dita (alternativa a TipStim)</u>

Programma u1 su entrambi i lati (alternativa P13)

Impostazioni:	modalità di stimolazione continua	TENS
	Frequenza	20 Hz
	Larghezza d'impulso	200 uS
	Durata del trattamento	30 minuti



<u>Impostare il programma u1 se non è ancora visibile sullo schermo:</u>

* premere il pulsante di avvio (1)
* Premere il pulsante del programma (2) per 3 secondi (P lampeggia).
* Impostare il programma P u1 (o P13) con il pulsante (3).
* premere il pulsante del programma (2)


*Applicare gli elettrodi alle dita come mostrato, collegando un canale per dito.

* Aumentare la corrente con (3 + 4) per canale fino ad avvertire un formicolio percettibile senza contrazione.


Trattamento quotidiano da 4 a 12 settimane per mezz'ora.





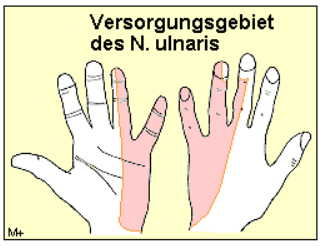

nervo mediano

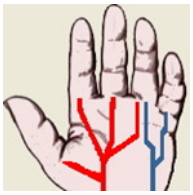

nervo ulnare


Applicazione per la stimolazione "neuromodulazione" tibiale o sacrale
Programma u1 fronte/retro

Impostazioni:	modalità di stimolazione continua TENS	
	Frequenza	20 Hz
	Larghezza d'impulso	200 uS
	Durata del trattamento	30 minuti


Impostare il programma u1 se non è ancora visibile sullo schermo:

* premere il pulsante di avvio (1)
* Premere il pulsante del programma (2) per 3 secondi (P lampeggia).
* Impostare il programma P u1 con il tasto (3)
* premere il pulsante del programma (2)
* Stimolazione del nervo tibiale su entrambe le ossa del piede.

Stimolazione del sacro S2 / S3

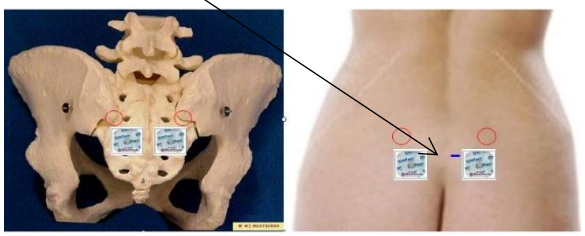



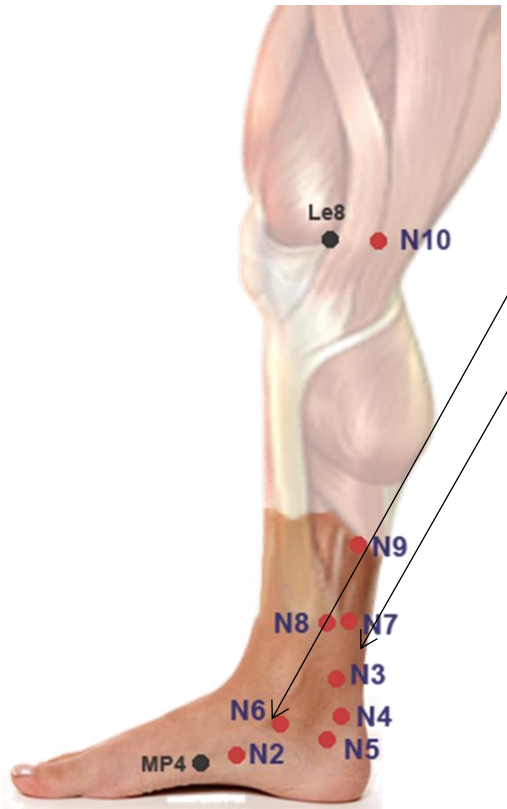


Posizione elettrodi adesivi Pals Platinum 25 mm o Pals ValuTrode 32 mm sul punto N3.

Cavo rosso al N3.

Quando si aumenta la corrente, occorre una flessione plantare dell'alluce (tirando verso il basso). Abbassi la corrente a tal punto che non ci sia una contrazione.

Un piacevole formicolio dovrebbe essere percepitato.

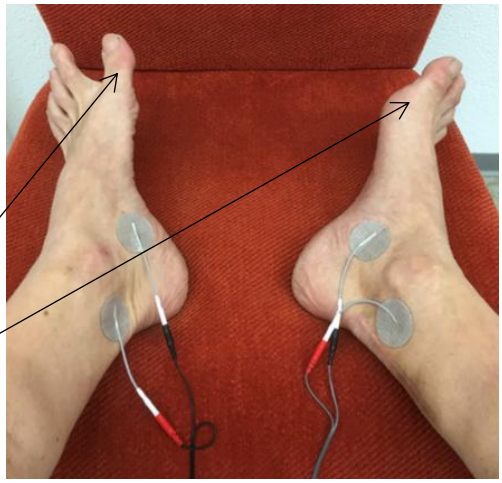

Medizintechnik

KOMPETENT & PERSÖNLICH -
SEIT ÜBER 40 JAHREN IHR SPEZIALIST IN DER ELEKTROTHERAPIE

COMPÉTENT & PERSONNEL -
VOTRE SPÉCIALISTE DE L'ÉLECTROTHÉRAPIE DEPUIS PLUS DE 40 ANS

COMPETENTE E PERSONALE -
IL VOSTRO SPECIALISTA IN ELETTROTERAPIA DA OLTRE 40 ANNI

Infos

www.parsenn-produkte.ch

Shop

Tel: 081 300 33 33 / Mail: shop@parsenn-produkte.ch

shop@parsenn-produkte.ch
Telefon 081 300 33 33
parsenn-produkte.ch

parsenn-produkte ag
kosmetik • medizintechnik